

GPS UR MIRA

Stella Care beskytter demensramte mod at blive væk. Vi tilbyder et lokaliseringssystem og GPS-enheder i verdensklasse. Det giver demensramte frihed, og det skaber tryghed for pårørende og plejepersonale.

MIRA - SMUKT, MODERNE OG FEMININT

Uret er opkaldt efter kæmpestjernen Mira, som har et smukt rødguld skær. Uret er såvel smukt som feminint og den demensramte vil bære det med glæde. På den måde skaber det værdi og tryghed for både plejepersonale, pårørende og personen med demens.

PRODUKTEGENSKABER

Tid mellem nye positioner ved aktiv sporing	15 sek.
Batteritid	24-45 timer
Mulighed for geo-fence (ned til)	20 meter
Mulighed for låsbar urrem	Ja
Mulighed for hjemmezone strømsparer	Ja
Sporing via brugervenlig app på telefon, tablet eller PC	Ja
Vandtæt	Ja - IP68
Mulighed for to-vejs tale	Ja
Oplader og ledning til opladning medfølger	Ja



VEJLEDNING

Urets skærm er som udgangspunkt slukket, men tænder ved bevægelse. Hvis du selv vil aktivére skærmen, kan du trykke på én af knapperne i siden, eller ved at trykke to gange direkte på skærmen.

Er uret løbet tør for strøm, kan det oplades ved at placere det i induktionsopladeren som vist her.



SÅDAN OPLADER DU URET

Hvis der ikke er lys i skærmen, er uret løbet tør for strøm. Sæt uret i opladeren. En fuld opladning tager omkring 2,5 time.

SÅDAN TÆNDER DU URET

Når du tager uret fra opladeren, skal du tænde uret. Hold den nederste knap nede til uret lyser (ca. 5 sekunder).

SÅDAN SER DU URETS STATUS

Dobbeltklik på urets skærm. Du vil nu kunne se urets ID-nummer, batteriniveau og status for GPS- og netværkssignal.

SÅDAN LÆSER URET TIDEN HØJT

Hvis oplæsning er aktivéret – tryk én gang på en af knapperne på siden af uret.

SÅDAN RINGER DU OP FRA URET

Tryk én gang på en af knapperne på siden af uret. Bekræft opkaldet ved at trykke på skærmen.

Er uret indstillet til at kunne kontakte to telefonnumre, vil knapperne være indstillet til at kontakte, hver deres nummer. Kontakt Stella Care, hvis du ønsker at uret skal ringe op.

* Vær opmærksom på at vi løbende opdaterer features, ny funktionalitet, samt vejledninger på vores hjemmeside. Derfor råder vi dig til at se på www.stellacare.dk/vejledninger, for mere information. Nogle funktioner skal aktivéres inden bestilling, kontakt Stelle Care, for at høre mere om vores forskellige muligheder.



1

SÅDAN AKTIVÉRE DU URETS MENU

For at tilgå urets menu, skal du trykke 12-6-12 på uret.



2

NÅR DU HAR AKTIVÉRET URETS MENU

Har du mulighed for at ændre på urets indstillinger, slukke eller genstarte uret. Du bruger pilene til at navigere mellem disse.



3

DISSE INDSTILLINGER KAN DU ÆNDRE

Under punktet indstillinger har du mulighed for at ændre design på urskiven eller aktivere oplæsning af tid.



4

SKIFT URSKIVENS DESIGN

Brug pilene til at se de forskellige designs. Når du har fundet det design, der passer til borgeren, trykker du på det og et grønt ikon indikerer at urskiven er aktiv.



5

SÅDAN AKTIVÉRE DU OPLÆSNING AF TID

Ønsker du at aktivere oplæsning af tid, skal du vælge "Oplæsning" i menuen. Som standard vil oplæsning være slået fra. Tryk på den hvide cirkel for at aktivere.



SÅ LET ER DET

Det eneste du skal bruge er en GPS enhed og vores app.

- > GPS enheden bæres af personen med demens.
- > App'en bruges af plejepersonale eller pårørende.


HVAD GØR DU HVIS PERSONEN IKKE ER VENDT HJEM?

I app'en er der en knap, som hedder "find GPS". Trykker du på den, vil personens position vises på et kort. Personens position opdateres automatisk ca. hvert 15. sekund, hvis man søger efter personen.

HVORDAN MODTAGER DU INFORMATION OM ENHEDEN?

For at gøre det nemt for dig som pårørende eller plejepersonale, kan du i app'en se vigtige informationer om GPS'en.

- > Du kan fx se batteriniveau og om GPS'en er tændt eller slukket.
- > Du kan få en alarm gennem app'en, hvis personen er uden for geofence.

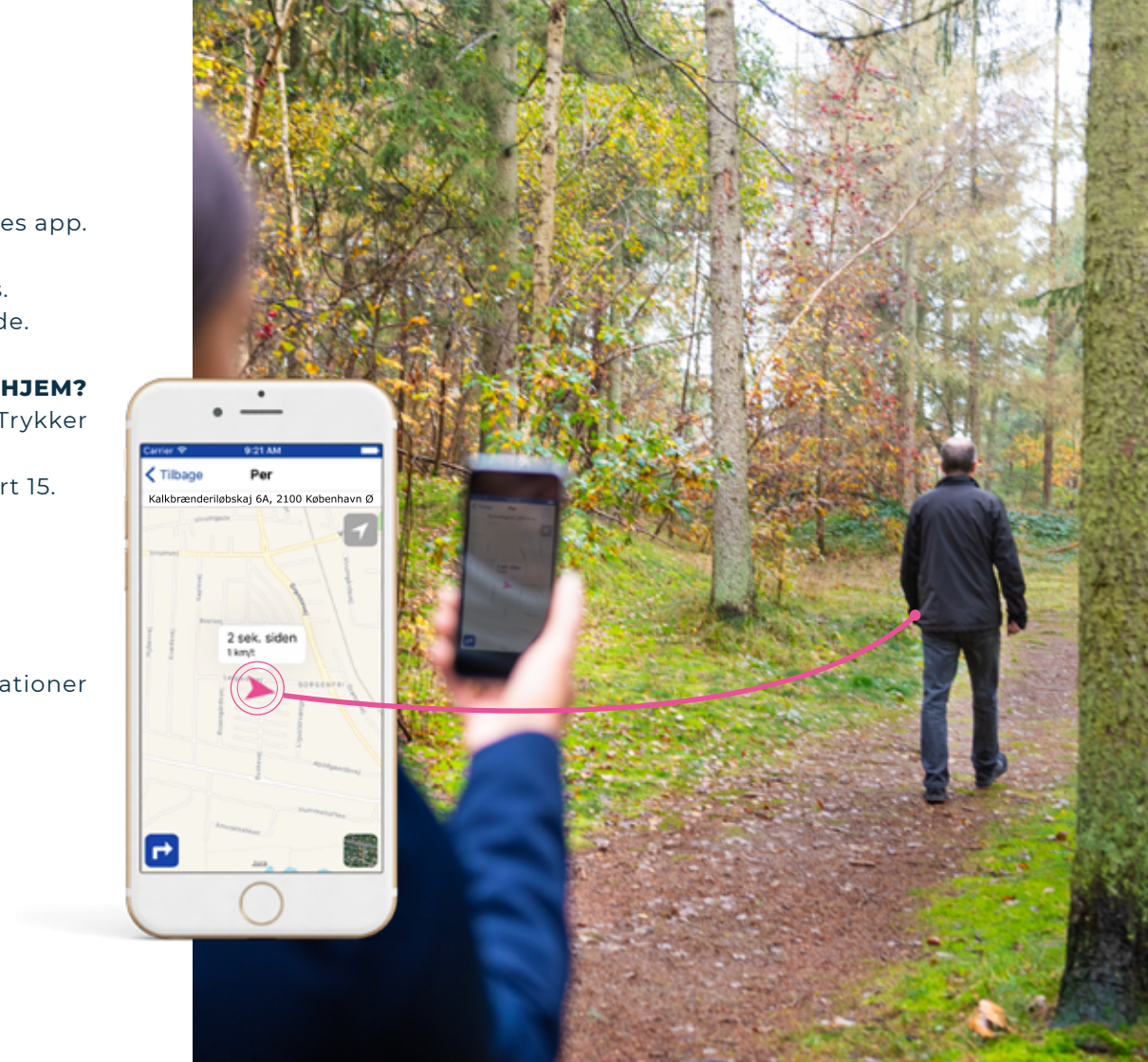

3 TING DU SKAL VIDE NÅR DU VÆLGER SAMARBEJDSPARTNER

HVOR LÆNGE KAN DU VENTE, FØR DU FÅR EN NY POSITION?

Jo længere tid, der går før du får en ny position, jo længere tid går der, før du ved, hvor personen er. Hos os går der kun sekunder mellem, hver nye position, når du leder efter en person. Det gør der fordi, hvert sekund er vigtigt, når en person med demens er blevet væk.

HVORFOR ER DER FORSKEL PÅ PRODUKTERNES BATTERITID?

Strømforbruget afhænger primært af, hvor ofte du ønsker at modtage positioner fra enheden. Få positioner giver længere batteritid, men større risiko for, at personen kommer langt væk uden nogen opdager det.


GPS ENHEDER SOM ER VÆRDIGE AT BÆRE FOR DEN DEMENSRAMTE

Vores produkter fås i mange forskellige udformninger, eksempelvis som armbåndsur eller som en lille boks. Produkterne er alle diskrete og værdige at bære for personen med demens.



DOWNLOAD OG HENT VORES APP "CARE TRACKER"

Når du er logget ind i app'en, kan du se en oversigt over alle dine tilknyttede GPS enheder.

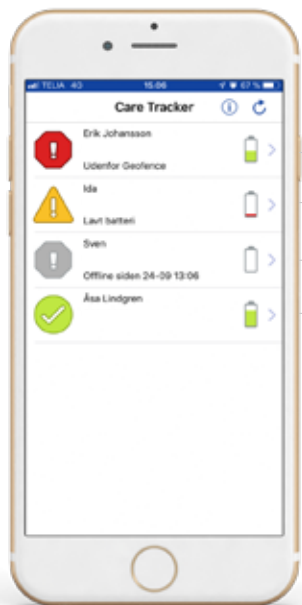

GPS enheden er udenfor geofence. Angivet med alarmsymbol samt teksten "Uden for Geofence".


Denne GPS enhed har lavt batteri og skal lades op. Angivet med advarselssymbol samt teksten "Lavt batteri".

Et gråt ikon fortæller, at GPS enheden er slukket eller uden forbindelse. Undersøg at der er strøm på GPS'en og at den er tændt.

Denne GPS enheds status er normal. Der er intet brugeren skal være opmærksom på.

KOM GODT I GANG MED APP'EN

Efter du har valgt en GPS enhed fra listen, har du følgende muligheder.

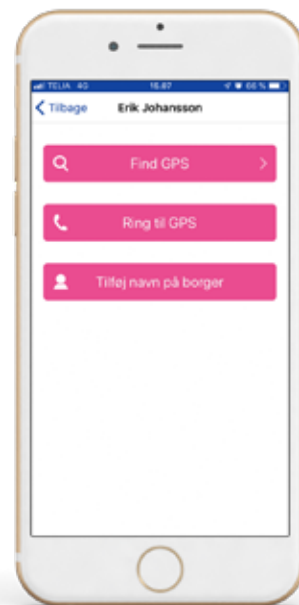

Et kort åbnes og du kan nu se GPS enhedens position.

Der ringes op til GPS enheden, som selv løfter røret, efter den har ringet en eller to gange. Der kan herefter føres en samtale.

Her kan du ændre navnet på den person, som bærer GPS enheden.

FIND GPS

Når du har trykket på "Find GPS", vises et kort. Den lyserøde pil viser GPS trackerens position og tidspunktet ovenfor angiver, hvornår positionen var sendt.

Øverst vises den nærmeste adresse.

Den blå prik viser din egen position. For at fjerne eller vise den blå prik, skal du trykke på symbolet øverst i højre hjørne.

Ønsker du at skifte mellem originalt- eller satellitkort, skal du trykke på knappen nederst i højre hjørne.

For at vise en rutevejledning fra dig til GPS'en, skal du trykke på pilen nederst i venstre hjørne.



HAR DU VALGT DEN LÅSBARE URREM


Er der lås på din rem, skal du bruge et lille redskab til at åbne spændet.

HUSK at gemme værktøjet. Du kan eventuelt sætte det fast på opladerkablet.



1

Læg værktøjet løst oven på låsen.

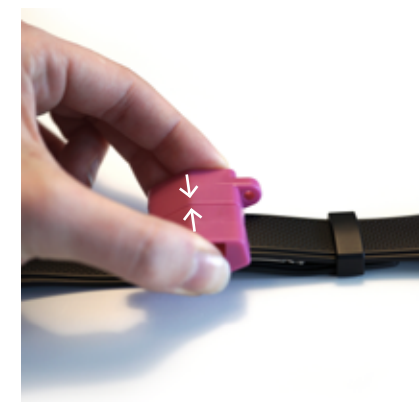

2

Tryk nu forsigtigt ind på værktøjet. Værktøjet har to tapper, som skal ramme de to huller på spændet.



3

Når låsen løsner sig, kan du løfte låsen op og tage uret af.



STELLA CARE

Vi designer og udvikler systemer, som skaber tryghed og frihed
for mennesker med demens, plejepersonale og pårørende.

Vores mission er, at være de bedste i verden til at lokalisere
mennesker der savnes.